

# ADVIES stomapleister plakken

## Advies voor het verwijderen & aanbrengen van de Provox stomapleisters

### **BELANGRIJK:**

Neem voor het plaatsen en verwijderen van de Provox stomapleisters altijd de tijd en ga zorgvuldig te werk. Dit is een vereiste voor een goed resultaat. Lees voor gebruik van de producten de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem bij twijfel of onduidelijkheden contact met ons op.

### Het verwijderen van de gebruikte Provox stomapleister

Om de pleister veilig te verwijderen zonder de huid te beschadigen, kunt u een **Remove doekje** gebruiken. Dit doekje is doordrenkt met een vloeistof die de lijmlaag van de pleister oplost, zodat de pleister makkelijk loslaat. Dit doekje bevat huidvriendelijke oliën.



Remove doekje, artnr. 59403125



Remove doekje, WAD50



Provox Cleaning Towels, artikel 7244

1. Houd het doekje tegen de kleefrand aan en druk het voorzichtig en gelijkmatig uit. Hierdoor komt de vloeistof tussen de huid en de pleister en weekt de pleister los.
2. Begin altijd aan de onderkant van de pleister om te voorkomen dat de vloeistof via de pleister in uw stoma loopt.
3. U kunt de pleister nu voorzichtig van de huid verwijderen.
4. Na het verwijderen van de oude pleister verwijdert u eventuele lijmrresten van de huid. Dit kan met hetzelfde **Remove doekje** dat u gebruikte voor het verwijderen van de pleister.
5. De achtergebleven olie van het Remove doekje kunt u verwijderen met een **Provox Cleaning Towel**. Dit doekje bevat alcohol en ontvet de huid.
6. Laat de huid vervolgens goed drogen (ca. 2 minuten) voordat u deze gaat voorbereiden op een nieuwe pleister.



## Het aanbrengen van een nieuwe Provox stomapleister

Voor een betere hechting van de pleister op de huid kunt u **Skin Prep** of **Skin Tac\*** wipes gebruiken. Dit doekje is doordrenkt met een vloeistof die een filmlaagje op de huid vormt als deze droog is. Dit laagje beschermt de huid en zorgt ervoor dat de pleister beter op de huid hecht.



\* Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Werking van beide producten is hetzelfde. *Skin Prep, artnr. 59420425 Skin Tac, artnr. MS407W*

1. Wrijf met het doekje op de huid waar u de pleister gaat aanbrengen.

**LET OP:** Voordat dit doekje gebruikt wordt, moet de huid goed droog zijn! (zie punt 6 op de voorpagina)


2. Laat de Skin Prep vervolgens minimaal 3 minuten drogen.
3. Verwarm de stomapleister door deze te wrijven tussen de handen, even onder uw bovenbeen te leggen terwijl u zit of door erop te blazen met een föhn.
4. Probeer de huid zo strak mogelijk te trekken op het moment dat u de stomapleister op de huid plakt.
5. Na het aanbrengen kunt u de stomapleister zachtjes op de huid masseren om deze goed te laten hechten.

## OPTIONEEL: aanbrengen extra lijmlaag

Dit is alleen nodig indien de Provox stomapleister ook met gebruik van Skin Prep onvoldoende hecht. Als dit het geval is, kan met behulp van **Provox siliconenlijm** een extra lijmlaag worden aangebracht.

*Provox siliconenlijm, artnr. 7720*

Indien er reeds ervaring is opgedaan met het aanbrengen en gebruik van de stomapleister, kan het zijn dat u ontdekt dat de stomapleister vaak op dezelfde plek loslaat. Dit is dan de zogenaamde “zwakke plek” waar u best nog wat extra lijm kunt opbrengen.

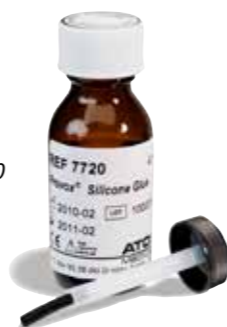

## Aanbrengen van een extra lijmlaag met Provox siliconenlijm

1. Breng de lijm met het kwastje dun aan op de huid op die delen waar de Provox pleister in aanraking komt met de huid.
2. Laat de lijmlaag min. 5 minuten aan de lucht drogen.
3. Indien nodig, kan een tweede laagje lijm worden aangebracht. Herhaal dan stap 1 en 2.
4. Druk de pleister stevig aan op de huid.

**BELANGRIJK:** Het gebruik van Provox siliconenlijm is niet geschikt voor de gevoelige huid! (Langdurig) gebruik van Provox siliconenlijm kan leiden tot huidirritaties en is dus niet voor iedereen geschikt.

## Het plaatsen van de Provox (FreeHands) HME-cassette

Wacht tenminste 30 minuten voordat u de Provox FreeHands HME-cassette of de Provox FreeHands FlexiVoice op de stomapleister plaatst. Gebruikt u de Provox XtraMoist of XtraFlow HME-cassette? Wacht dan 5 minuten voor u deze aanbrengt.



*Provox FreeHands HME-cassette in combinatie met een Provox StabiliBase pleister*



*Provox FreeHands FlexiVoice in combinatie met StabiliBase pleister*



*Provox Xtra HME-cassette*

## Ervaart u problemen met het luchtdicht afsluiten van uw stoma?

De **Provox LaryButton** is een korte canule die zichzelf op z'n plaats houdt in de stoma. Door de opstaande rand aan de tracheale zijde, kan de Provox LaryButton achter de tracheale rand klemmen waardoor bij een juiste passing, een luchtdichte afsluiting ontstaat. Voor extra versteviging is een speciaal pleistersysteem ontwikkeld: de **Provox LaryClip**.



## BELANGRIJK:

Hebt u interesse in de Provox LaryButton? Raadpleeg dan uw logopedist of verpleegkundig consulent. De Provox LaryButton dient altijd te worden aangemeten door een bevoegd medisch hulpverlener.